



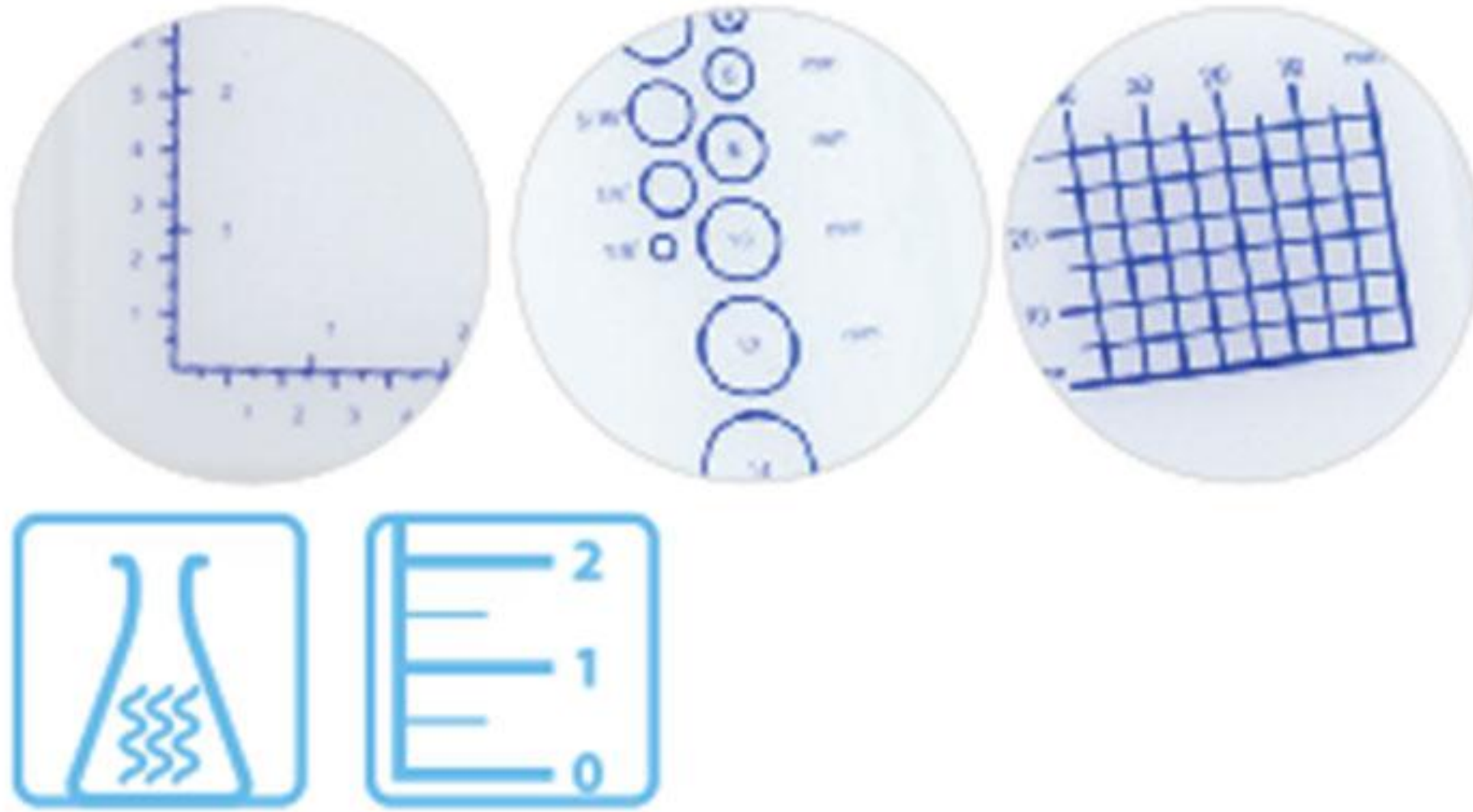

Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

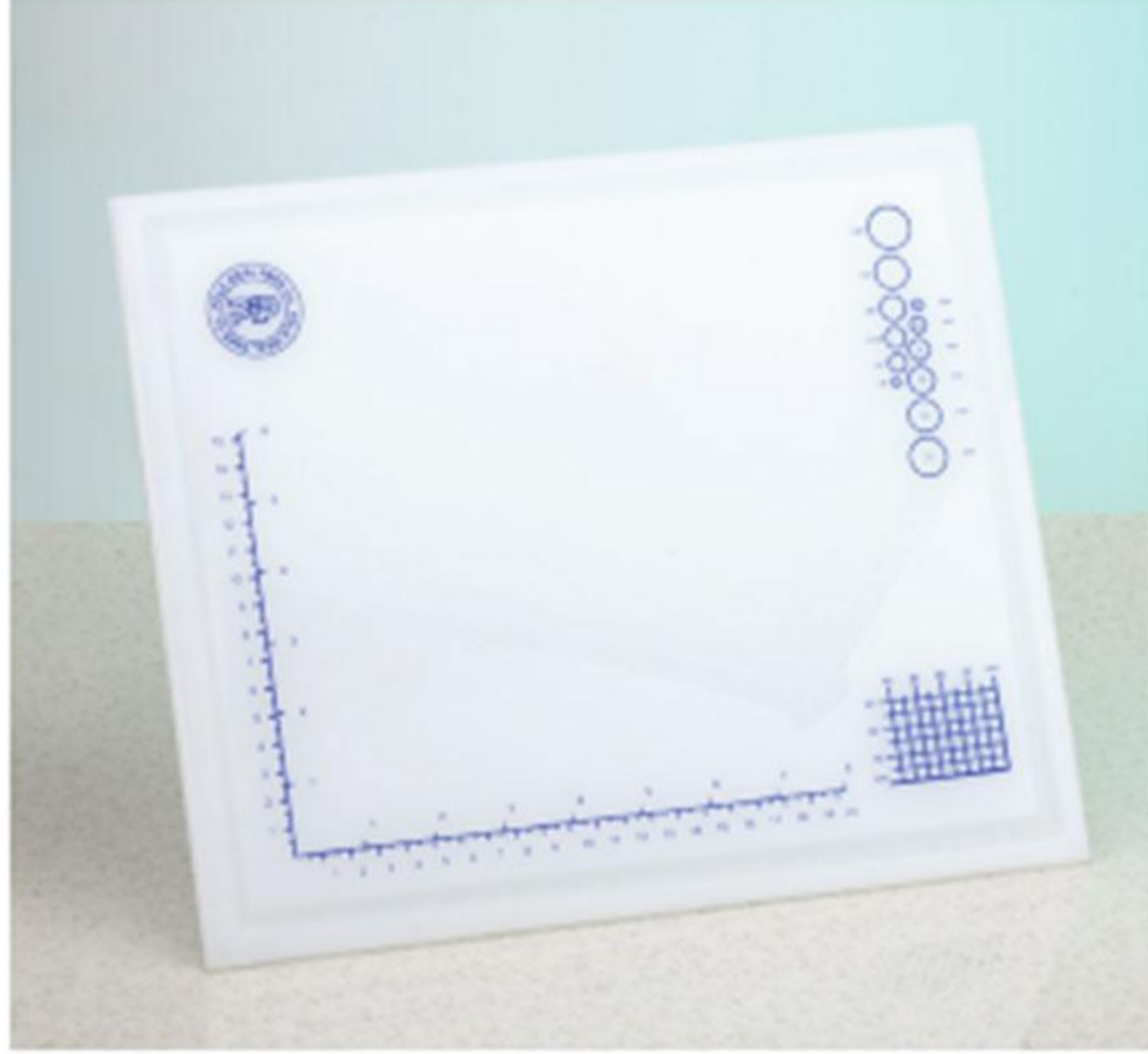

Diseksiyon tepsisi

Tepsi üzerinde hızlı ve doğru ölçüm ile çeşitli dokuların diseksiyonu

P.I.P. diseksiyon tepsisi, genelde cam, çelik veya kalitesiz plastikten yapılmış normal tepsilere göre, birçok fazla sunar. Normal tepsilerin sorunlarından olan sıvıların tepsi üzerine akması, bıçakların körleşmesi, kabarma ve eğilme, P.I.P. diseksiyon tepsisinde çözülmüştür. Doğru ölçüm ve kesme için tepsi üzerine basılmış dereceli eksenler, ağ şeklinde bir dikdörtgen ve çeşitli çaplardaki daireler sayesinde, numuneyi ölçmek

için başka bir yere taşımanıza veya cetvel kullanmanıza gerek kalmaz. Tepsinin çevresinde bulunan oluklar, sıvıların diseksiyon alanına ve tepsinin dışına akmasını engeller. Diseksiyon tepsisi, laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklı olan yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) yapılmıştır. Ayrıca bu ürün yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir.

*** Baskıların silinmesine neden olacağına göre diseksiyon tepsisini temizlemek için asla xylene kullanmayınız.**

Ölçüm çizgileri:

- Yatay eksen 20cm (8 inç)
- Dikey eksen 15cm (6 inç)
- 14 - 4 mm çapında 6 daire ($\frac{1}{8}$ ila $\frac{5}{8}$ inç)
- 5 mm'lik dereceli ağ şeklinde bir dikdörtgen (30 mm x 40 mm)

GS1 kodu	Boyutları
6260807500781	320 mm x 280 mm x 10 mm