




Pole Ideal Tajhiz Co.
www.medpit.com

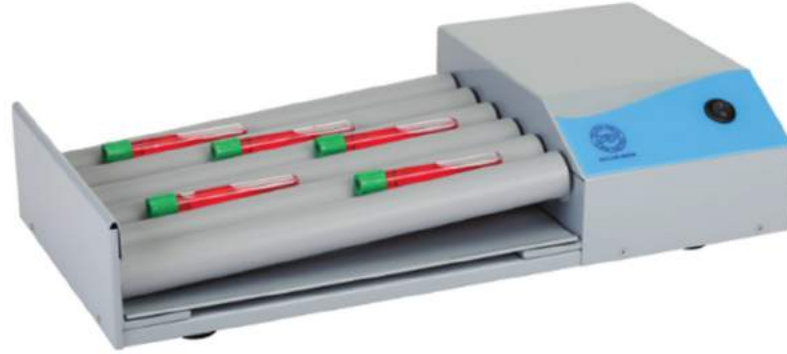

Hematoloji karıştırıcı (Roller Mixer)

Laboratuar süspansiyonlarının karıştırılması ve düzgün tutulması

Hematoloji karıştırıcı 6 silindri olup çeşitli kan numunesi, viskozite numunesi ve süspansiyonların karıştırılması için uygundur. Bu cihazın fonksiyonel özelliklerinden biri, silindirlerin aynı anda döner ve dikey olarak hareket edilmesidir. Bu yüzden çeşitli tüpler ve şişeleri karıştırmak için üzerine yerleştirebilirsiniz. Numunenin aniden

dökülmesi durumunda kolay toplama ve temizleme amacıyla silindirlerin altına yıkanabilir bir koruyucu tepsi yerleştirilmiştir. Hematoloji karıştırıcının gövdesi ve boyası, laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asitlere ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Teknik özellikleri	Dikey hareket aralığı	~20 mm
	Silindir boyutları (çap x uzunluk)	φ32 mm x 320 mm
	Dönme hızı	60 rpm
	Gerilim	220 V
	Frekans	50 Hz
	Maksimum güç	20 W
	Yaklaşık ağırlık	6.6 kg

GSI kodu	Ürün kodu	Boyutlar (mm)
6265738000492	PITR6B	500 x 260 x 120

Hojjatdoust Caddesi, South Felestin Caddesi, Keshavarz Boulevard , No:13, Kat:11 Tahran-İran

Telefon:+98 21 88994482-3 Faks:+98 21 88994484 Posta kodu:1416694334 Telefon: +98 21 88545922

@poleideal

@poleideal

09123340197

Pole Ideal Pars Co.